

1. Kurzzugbinden-Kompression in der Ödemphase



Wickeltechnik mit Rosidal® sys




1. Vor Anlage des Verbandes: phasengerechte Wundversorgung mit **Suprasorb®**-Produkten. **tg®-Schlauchverband** in ca. 2,5-facher Länge (Zehenspitze - Ferse - Knie) abschneiden und bis unterhalb des Knies überstreifen. Die überstehende Hälfte dem Patienten in die Hand geben, um den Fuß im Sprunggelenk in einer 90-Grad-Stellung zu halten.



2. Ansatz der **Rosidal® soft** am Fußrücken auf der Innenseite unter Einschluss des Zehengrundgelenkes.




3. Bindentouren überlappen sich immer um ca. 1/2 - 2/3.

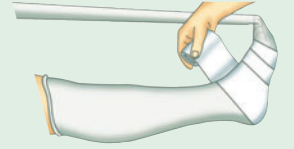


4. Bindentouren zirkulär bis zur Ferse unter Einschluss der Ferse.




5. Fersen-Verriegelungstour unterhalb der Ferse (zur Fußsohle hin).

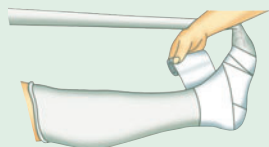


6. Fersen-Verriegelungstour oberhalb der Ferse (zur Achillessehne hin).

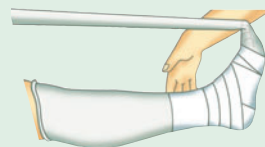


7. Weitere zirkuläre Bindentouren bis zum Wadenansatz.

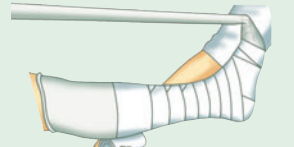


8. Wade wird mit zweiter **Rosidal® soft** in Achtertouren gewickelt.

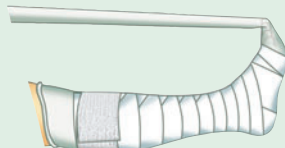


9. Fixierung des Bindenendes unterhalb der Kniescheibe mit einer Zirkulärtour **Mollelast® haft**.

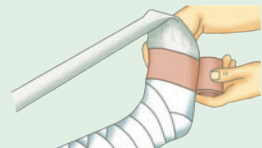


10. Ansatz der Kompressionsbinde **Rosidal® K** (8 cm breit) am Fußrücken auf der Innenseite unter Einschluss des Zehengrundgelenkes.

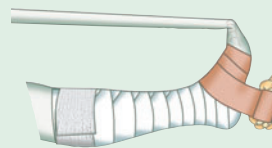


11. Bindentouren überlappen sich immer um ca. 1/2 - 2/3. **Rosidal® K** immer unter vollem Zug (max. Dehnung) anlegen.

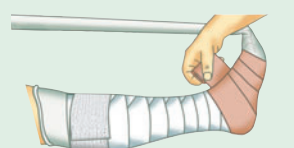


12. Bindentouren zirkulär bis zur Ferse unter Einschluss der Ferse.

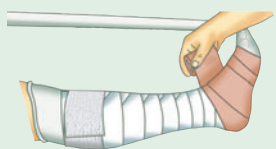


13. Fersen-Verriegelungstour unterhalb der Ferse (zur Fußsohle hin).

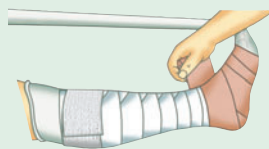


14. Fersen-Verriegelungstour oberhalb der Ferse (zur Achillessehne hin).

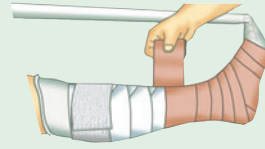


15. Weitere zirkuläre Bindentouren bis zum Wadenansatz.

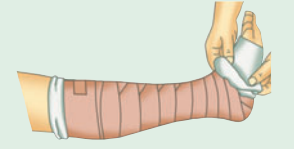

16. Wade wird mit **Rosidal® K** (10 cm breit) in Achtertouren gewickelt. Fixierung des Bindenendes unterhalb der Kniescheibe mit einem Streifen **Porfix®**. Der an den Zehen endende **tg®-Schlauchverband** wird über den Verband bis zum Knie gezogen.

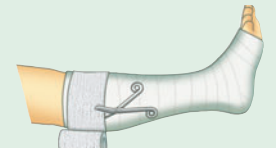

17. Die Fixierung der tg unterhalb des Kniegelenks und am Vorfuß erfolgt mit einer Zirkulärtour **Mollelast® haft**.

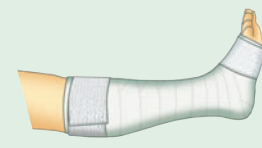

18. Fertiger Verband

Einfache Anlegetechnik „unter vollem Zug“

2. Fertigverband-Kompression nach Reduktion des Ödems

Einfach praktisch: **Rosidal® mobil**

- komfortabel wie ein Strumpf
- einfach anzulegen
- passt in jeden Schuh

